

Bellus3D® Dental Pro



Distributed by




bellus3D®
www.bellus3d.com



高速かつ簡単なセルフスキャン

特許取得された独自スキャン技術により、アプリの指示通りに顔の向きを変えるだけで、自動的に顔面を読み取り。高解像度の 3D フェイススキャンが約 15 秒で可能な簡単操作です。

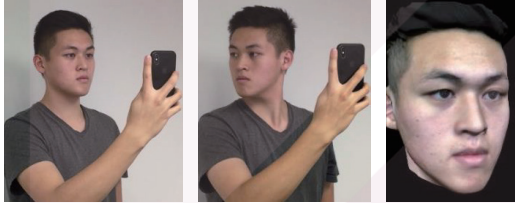

リップラインの自動認識

※ iOS Advanced、Windows with USB camera のみの機能

フェイススキャンの歯列とリップラインを自動認識。歯列 STL データ重ね合わせ機能により、治療計画・術後がイメージしやすい患者プレゼンテーションが可能です。



自動重ね合わせ機能

※ iOS Advanced、Windows with USB camera のみの機能

フェイススキャン

2つのフェイススキャンを重ね合わせて比較します。

デンタルスキャン

Visual Smile Aligner™により特別なマーカーがなくても簡単に歯列 STL データとフェイススキャンを重ね合わせます。


※ Visual Smile Aligner は特許出願中



CT スキャン


CT スキャンとフェイススキャンを重ね合わせます。

※ CT (DICOM 形式) はあらかじめ硬組織と軟組織それぞれの表示で STL 形式に変換したものを本品に登録します。

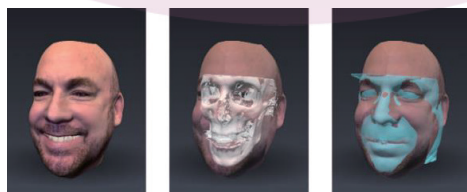

豊富なエクスポートオプション


フェイススキャンは STL/OBJ/PLY 形式で外部出力が可能です。Dolphin, excad, 3shape, iTero, i-CAT, dentalwings などのソフトウェアで互換可能です。

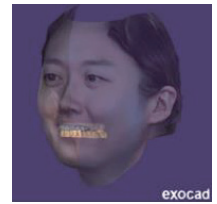

使用可能デバイス

Bellus3D Dental Pro for iOS

- Apple iPad Pro 11/12.9 inch (trueDepth Camera 搭載)
- Apple iPhone X+ (trueDepth Camera 搭載)

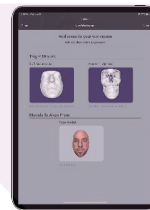

Bellus3D Dental Pro for Windows

Windows PC でも Bellus3D Face Camera (USB type-c) を接続することでフェイススキャンが可能です。



製品仕様	ライセンス	スキャンデータ エクスポート	クラウド ストレージ	※1 デンタルスキャン 重ね合わせ	※2 CT スキャン 重ね合わせ
Dental Pro for iOS Standard	年間使用契約 ライセンス	○	○	×	×
Dental Pro for iOS Advanced	年間使用契約 ライセンス	○	○	○	○
Dental Pro Window with USB camera	買取り 使用許諾	○	×	○	○

※1 STL、PLY 形式の歯列データ

※2 CT (DICOM 形式) はあらかじめ硬組織と軟組織それぞれの表示で STL 形式に変換したものを本品に登録します。

お問い合わせ先

©2019 Bellus3D. All rights reserved. 画像、ロゴ、商標登録された内容の無断使用は禁止します。
●色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。●製品仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。



発 売 元 株式会社 ジーシー オルソリー
東京都板橋区蓮沼町76-1

お客様窓口 0120-108-171
受付時間 ● 10:00~16:00 (土・日・祝日を除く)

製品デモ動画

www.bellus3d.com/videos



Technology by



www.bellus3d.com