

ORTHOLY INDUCE MS-II

歯科矯正用アンカースクリュー
インデュース MS-II



Narrow
(ϕ 1.4 mm)



Regular
(ϕ 1.6 mm / ϕ 1.8 mm)



Double Thread
(ϕ 1.6 mm / ϕ 1.8 mm)

歯科矯正用アンカースクリュー
高度管理医療機器 22400BZl00013000

- 植立後の骨への固定を重視したネジ幅・ピッチ・形状
- 植立部位に合わせてネジ部・ネック部長さの選択が可能
- 先端部は細く（歯根相当部）、根本部（歯槽骨相当部）は太いテーパー形状
- ガンマ線滅菌済みのため即時使用可能
- 歯肉のコンフォート性を考慮した面取り加工
- 把持しやすく、植立後は抜けやすい独自構造のドライバーチップ


INDUCE MS-II Products

● ANCHOR SCREWS



直 径	歯肉厚 + 骨内長さ	全 長	適 応 部 位
φ 1.4 mm	1 + 5 mm	6 mm	頬側
	1 + 6 mm	7 mm	頬側
φ 1.6 mm	1 + 5 mm	6 mm	頬側 / 正中口蓋
	1 + 6 mm	7 mm	頬側 / 正中口蓋
	1 + 7 mm	8 mm	頬側
	2 + 6 mm	8 mm	頬側 / 口蓋側
φ 1.8 mm	1 + 5 mm	6 mm	正中口蓋
	1 + 6 mm	7 mm	頬側 / 口蓋側
	1 + 7 mm	8 mm	頬側
	2 + 6 mm	8 mm	頬側 / 口蓋側
	3 + 6 mm	9 mm	口蓋側
	4 + 6 mm	10 mm	口蓋側 / 臼後三角
	5 + 6 mm	11 mm	臼後三角
ダブルスレッド φ 1.6 mm	1 + 6 mm	7 mm	頬側
	1 + 7 mm	8 mm	頬側
ダブルスレッド φ 1.8 mm	1 + 6 mm	7 mm	頬側 / 正中口蓋
	1 + 7 mm	8 mm	頬側

● SURGICAL INSTRUMENTS

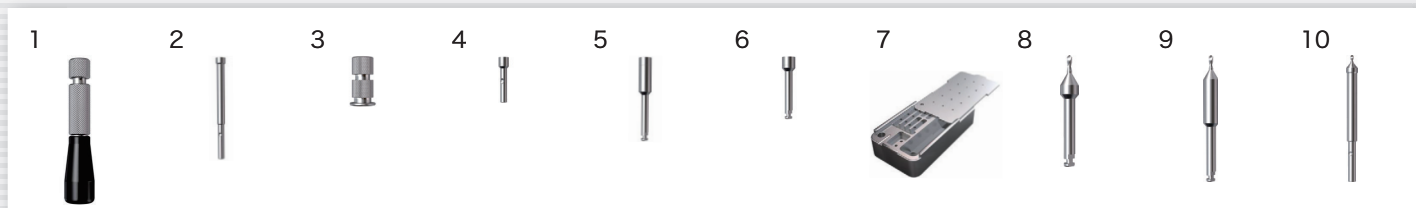

製 品 名	外観画像	用 途
ハンドドライバー L	1	頬側へ植立するスクリューの把持
ハンドドライバーチップ L	2	
ハンドドライバー S	3	
ハンドドライバーチップ S	4	口蓋側 / スクリュー撤去
エンジンドライバーチップ L	5	正中口蓋へ植立するスクリューの把持
エンジンドライバーチップ S	6	頬側 / 口蓋側
インスツルメントボックス	7	インスツルメント滅菌 / 収納
パイロットドリル エンジン用 S	8	頬側 / 口蓋側用パイロットドリル
パイロットドリル エンジン用 L	9	正中口蓋用パイロットドリル
パイロットドリル ハンド用	10	頬側用パイロットドリル

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

●色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。●製品仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。●掲載の臨床写真は臨床例で製品の効能・効果を保証するものではありません。

外国特許承認取得 オースリョーション社 (大韓民国)

選任製造販売元 株式会社 ジーシー

発 売 元 株式会社 ジーシー オルソリー

東京都板橋区蓮沼町76-1

お 客 様 窓 口 0120-108-171

受付時間 ●10:00～16:00 (土・日・祝日を除く)

ジーシーオルソリー ホームページ

www.gcortholy.com

Your smile makes us happy.

Printed in Japan.