

ORTHOLY INDUCE MS- II

歯科矯正用アンカースクリュー
インデュース MS-II




ORTHOLY

シンプルな操作性、植立後の安定性と快適性を考慮した 独自デザインのアンカースクリュー

STABILITY

独自のテーパー形状により
皮質骨のサポートを向上

STERILIZATION

ガンマ線滅菌による高い
安全性を実現。開封後、すぐに
使用可能

COMFORT

軟組織のコンフォート性を考慮
して角を落とした面取り加工

VARIETY

植立する部位の骨や歯肉の
状況に合わせた形状の選択
が可能

TRAPEZOIDAL THREAD

台形スレッドによる皮質骨部で
のサポート強化

LATERAL CUTTING GROOVE


埋入時の過度なストレス集中を
軽減するためのラテラル・カッ
ティング・グルーブを採用

DRILLING THREAD

セルフドリルしやすい先端部の
ネジ山形状

SHARPE EDGE


穿孔しやすい螺旋状の鋭利な
先端形状

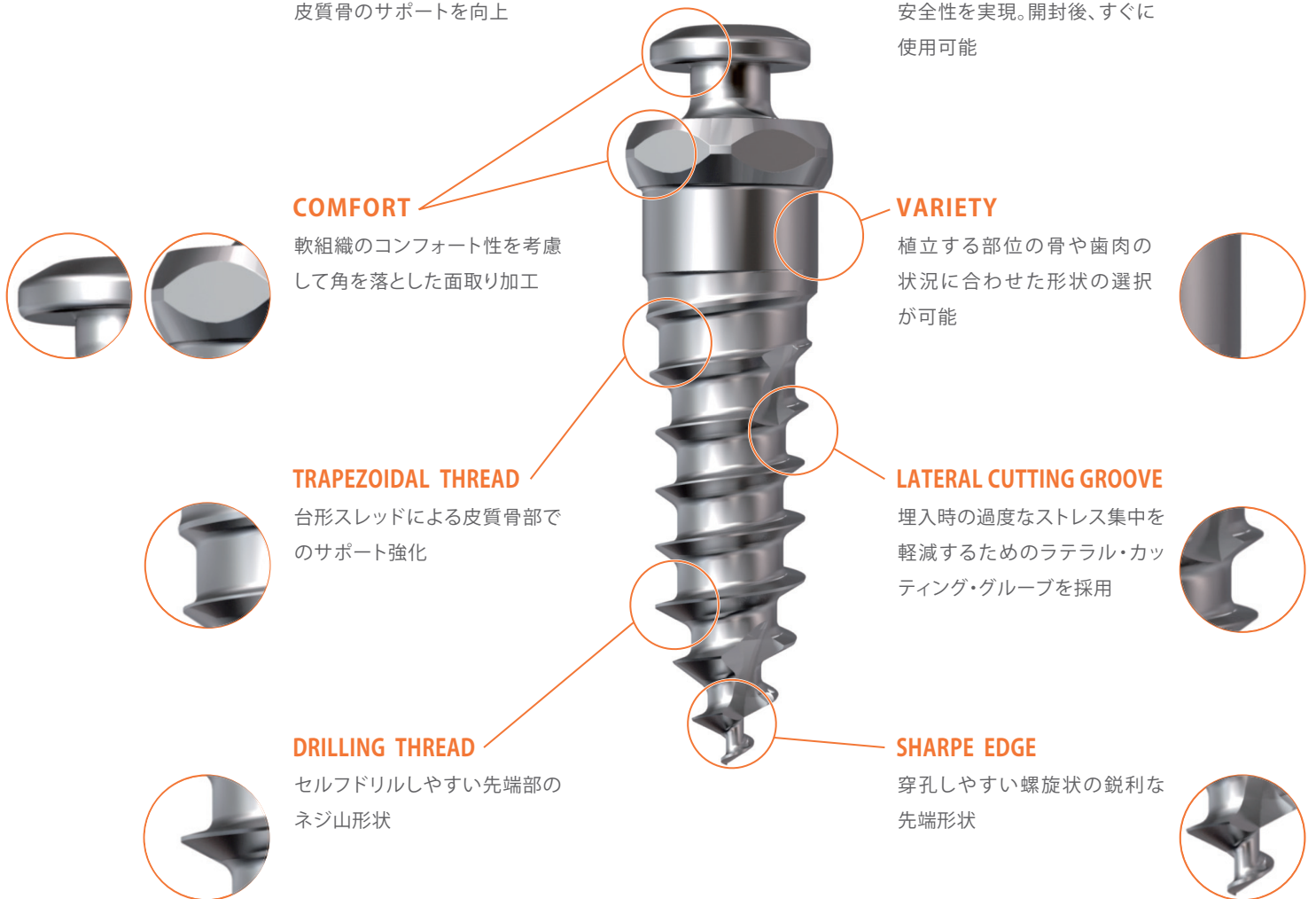

製品仕様

歯科矯正用アンカースクリュー
INDUCE MS- II
ミニスクリュー

包装●1 函 2 本入
高度管理医療機器
歯科矯正用アンカースクリュー
22400BZIO0013000

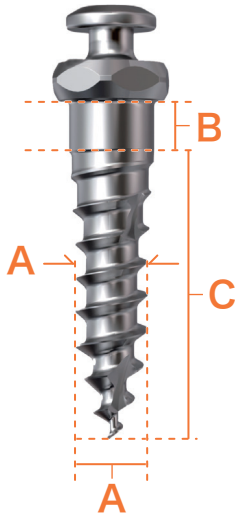


※ A:中心径 / B:歯肉厚 / C:骨内長さ

A	B	C	適 応 部 位
φ1.4mm	1 + 5mm		頬側
	1 + 6mm		頬側
φ1.6mm	1 + 5mm		頬側 / 正中口蓋
	1 + 6mm		頬側 / 正中口蓋
	1 + 7mm		頬側
	2 + 6mm		頬側 / 口蓋側
φ1.8mm	1 + 5mm		正中口蓋
	1 + 6mm		頬側 / 口蓋側
	1 + 7mm		頬側
	2 + 6mm		頬側 / 口蓋側
	3 + 6mm		口蓋側
	4 + 6mm		口蓋側 / 臼後三角
	5 + 6mm		臼後三角


歯科矯正用アンカースクリュー
INDUCE MS- II
ミニスクリュー
Double Thread

包装●1 函 2 本入
高度管理医療機器
歯科矯正用アンカースクリュー
22400BZIO0013000

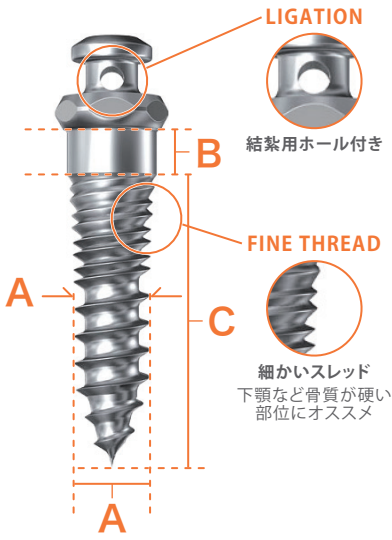

※ A:中心径 / B:歯肉厚 / C:骨内長さ

A	B	C	適 応 部 位
ダブルスレッド φ1.6mm	1 + 6mm		頬側
	1 + 7mm		頬側
ダブルスレッド φ1.8mm	1 + 6mm		頬側 / 正中口蓋
	1 + 7mm		頬側

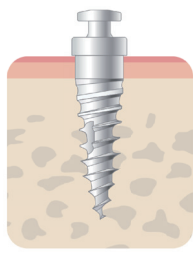

豊富なラインナップの中から
植立部位に適したサイズを
ご選択いただけます。

INDUCE MS-II
インスツルメント



ハンドドライバーL
頬側へ植立する
スクリューの把持
包装●1本



ハンドドライバーS
口蓋側 / スクリュー撤去
包装●1本



ハンドドライバーチップL
頬側へ植立する
スクリューの把持
包装●1本



ハンドドライバーチップS
口蓋側 / スクリュー撤去
包装●1本



エンジンドライバーチップL
正中口蓋へ植立する
スクリューの把持
包装●1本



エンジンドライバーチップS
頬側 / 口蓋側
包装●1本



インスツルメントボックス
インスツルメント滅菌 / 収納
包装●1個

高度管理医療機器 歯科矯正用アンカースクリュー インデューズ MS-II 22400BZI00013000
選任製造販売元 **株式会社 ジーシー** 外国特例承認取得 **ホメディ社** (大韓民国)
東京都板橋区蓮沼町 76-1



パイロットドリルハンド用
頬側用 / パイロットドリル
包装●1本



パイロットドリルエンジン用S
頬側 / 口蓋側用 / パイロットドリル
包装●1本



パイロットドリルエンジン用L
正中口蓋用 / パイロットドリル
包装●1本

一般医療機器 手術用ドリルビット インデューズ MS-II / パイロットドリル 13B1X00155000287
製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都板橋区蓮沼町 76-1

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。
●色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。●製品仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。●掲載の臨床写真は臨床例で製品の効能・効果を保証するものではありません。

発 売 元 **株式会社 ジーシー オルソリー**
東京都板橋区蓮沼町 76-1

フリーダイヤル  0120-108-171 受付時間●10:00～16:00(土・日・祝日を除く)

ジーシーオルソリー ホームページ
www.gcortholy.com

